



- Centrales d'air comprimé médical avec compresseurs sec à spirales (duplex et triplex)
- Version capotée ou non capotée
- Installations modulables pour tout type de local et d'accès
- Centrales conformes à la norme NF EN ISO 7396-1
- Faible niveau sonore
- Chaîne de traitement d'air avec sécheur par adsorption SEC 7HC
- Sonde d'hygrométrie et alarme réseau incluses
- Qualité d'air conforme à la monographie européenne
- Coffret de pilotage PROCOM 2
- Deux alimentations électriques indépendantes

Tête de compression




Caractéristiques

HOSPITAIR® G 10 bar	Débit * m³.h⁻¹		Puissance kW 50 / 60 Hz	Chaîne de traitement	Niveau sonore dB(A)		Poids kg	
	at 10 bar	at 8 bar			Version capotée	Version standard	Version capotée	Version standard
13SP2	12,6	15,6	2,2	AD5035	66	67	145	110
29SP2	29,3	36	5,5	AD5035	67	68	175	140
42SP2	42	52	7,5	AD5065	67	68	180	145

* Débit compresseur / Scroll t/min à 8 bar = + 657 t/min

Schéma de principe (ex : centrale duplex)

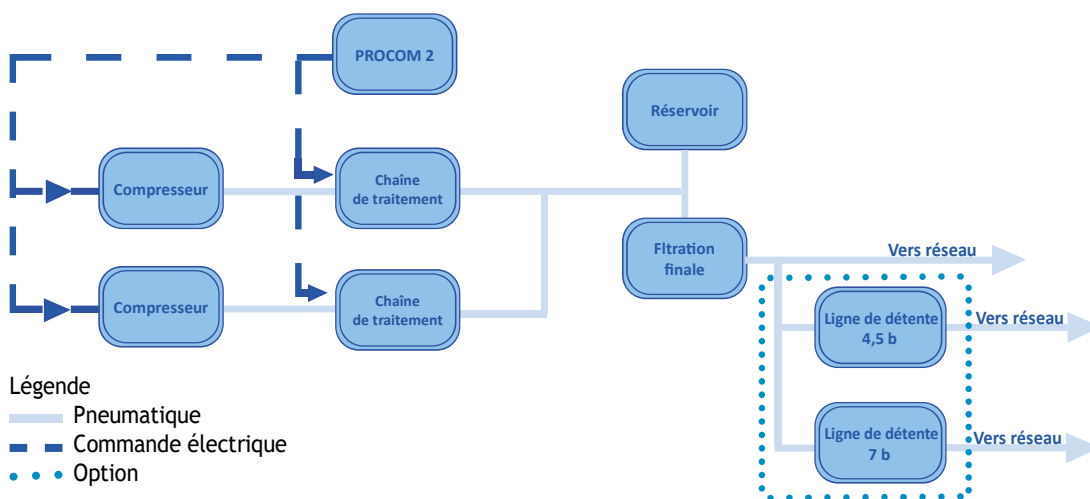

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

Configurations possibles

	1 ligne de production	2/3 lignes de production
PROCOM 2	■	■
Filtration finale	■	■
Hygromètre	■	■
Alarme réseau	■	■
Surveillance CO	◆	◆

- Équipement en série
- ◆ Équipement en option

Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
- Autres tensions et fréquences sur demande


Centrales d'air médical

Compresseur sec à spirales




Encombrenements (mm)

HOSPITAIR® SCROLAIR G
version capotée

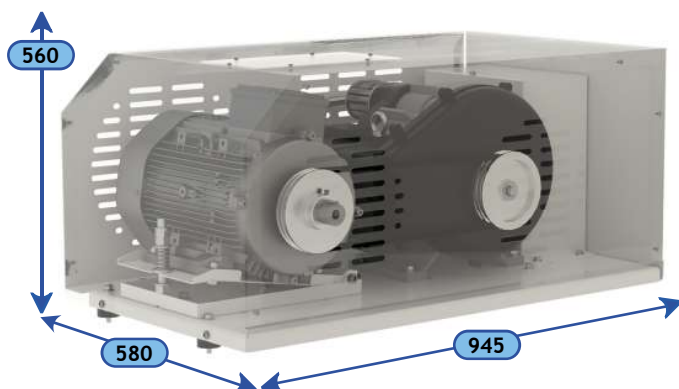

HOSPITAIR® SCROLAIR G
version standard

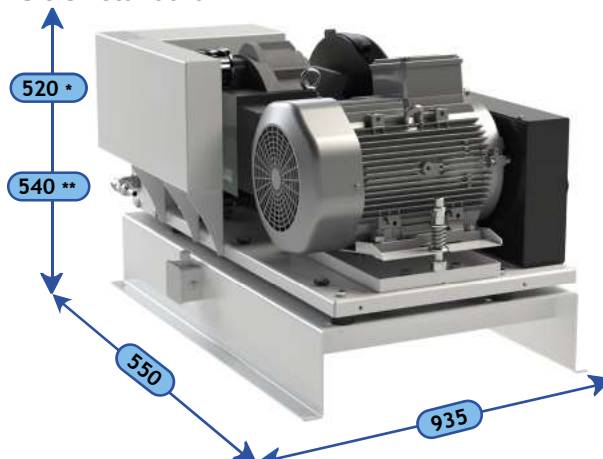

* 13SP2 - ** 29 & 42SP2

Références des centrales

		13SP2		29SP2		42SP2	
HOSPITAIR® SCROLAIR G		version capotée	version standard	version capotée	version standard	version capotée	version standard
Compresseur sec à spirales sur socle avec flexible de départ	50Hz	X x 824479	X x 824480	X x 824481	X x 824482	X x 824483	X x 824484
	60 Hz	-	-	X x 824485	X x 824486	-	-
Régulation PROCOM 2 (sonde hygro incluse)	1 ligne	724143					
	2 lignes	724137					
	3 lignes	724141					
SEC 7HC		CY10-PF36-SUB36/ AD5035-CHA36				CY20-PF72-SUB72 / AD5065-CHA72	
Chaîne de traitement		X x 924321				X x 924957	
Filtration finale Fixation murale	1 ligne	FP036S 724009				FP072S 724014	
	2 lignes	FP72DP 724014				FP72DP 724014	
	3 lignes	FP72DP 724014				FP144DP 724015	
Réservoir d'air vertical avec équipement - 11 bar voir page 81		1 x 900 l 1 x 721119		2 x 900 l 2 x 721119			

Références des accessoires et options

Report Status avec PROCOM 2 *	12 premières alarmes	624267	12 alarmes suivantes	622468
Ligne de détente simple	DS BP300 - 4,5 bar	624809	DS BP300 - 7 bar	624810
Ligne de détente duplex	DD BP300 - 4,5 bar	622305	DD BP300 - 7 bar	622306
Surveillance CO	PROCOM 2	724912		

* N'oubliez pas de commander les cordons électriques 615892 x 3 (voir p 83)

Spécifications pouvant évoluer sans préavis.