

# HOSPIVAC® G - EVISA

## Technologie lubrifiée



- Gamme de centrales de vide modulables
- Personnalisation de l'installation pour tout type de local et d'accès
- Pompes à vide à palettes lubrifiées EVISA.R
- Montage des pompes sur châssis individuel
- Double alimentation électrique (à partir de 2 pompes)
- Plusieurs modes de régulation proposés (voir tableau des configurations)
- Option FLEXO vide stable : système de régulation permettant l'utilisation de réservoirs de petite capacité
- Possibilité de surveillance à distance avec CYCLIC 2020 ou PROCOM 2
- Filtration anti-bactérienne duplex parallèle HEPA
- Pot de refoulement pour récupération des condensats
- Centrales conformes à la norme NF EN ISO 7396-1
- Alarme réseau incluse dans les coffrets MILLENIUM, CYCLIC 2020 et PROCOM 2
- Flexibles aspiration et refoulement fournis pour chaque pompe



### Caractéristiques

| HOSPIVAC® G<br>Pompes à palettes lubrifiées | Débit nominal<br>m³.h⁻¹ |       | Puissance<br>kW |       | Niveau<br>sonore<br>dB(A) |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|
|                                             | 50 Hz                   | 60 Hz | 50 Hz           | 60 Hz |                           |
| HOSPIVAC® G - E25.R                         | 28                      | 33    | 0,75            | 0,9   | 59                        |
| HOSPIVAC® G - E40.R                         | 44                      | 53    | 1,1             | 1,32  | 58                        |
| HOSPIVAC® G - E65.R                         | 68                      | 81    | 1,5             | 1,8   | 67                        |
| HOSPIVAC® G - E100.R                        | 100                     | 120   | 2,2             | 2,64  | 67                        |
| HOSPIVAC® G - E150.R                        | 132                     | 156   | 3               | 3     | 69                        |
| HOSPIVAC® G - E200.R                        | 200                     | 240   | 4               | 4,8   | 71                        |
| HOSPIVAC® G - E300.R                        | 300                     | 360   | 5,5             | 6,6   | 72                        |
| HOSPIVAC® G - E350.R                        | 360                     | 432   | 7,5             | 9     | 72                        |
| HOSPIVAC® G - E400.R                        | 426                     | 511   | 9               | 10,8  | 72                        |
| HOSPIVAC® G - E500.R                        | 513                     | 616   | 11              | 13,2  | 73                        |
| HOSPIVAC® G - E600.R                        | 635                     | 769   | 13              | 15,6  | 74                        |

### Configurations possibles

|                                                |                 | HOSPIVAC® G |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| PROCOM 2 (PM2)                                 | de 2 à 6 pompes | ■           |
| CYCLIC 2020 (C2020)                            | 2 ou 3 pompes   | ■           |
| MILLENIUM (MIL)                                | 2 ou 3 pompes   | ■           |
| LG7                                            | 1 pompe         | ■           |
| Filtration anti-bactérienne ( fixation murale) |                 | ■           |

■ Disponible



Gamme conforme à  
la directive 93/42/CEE



# Centrales de vide MODULABLES


pour applications médicales




## Encombres (mm)

### COFFRETS DE PILOTAGE


Pour 4 à 6 moteurs

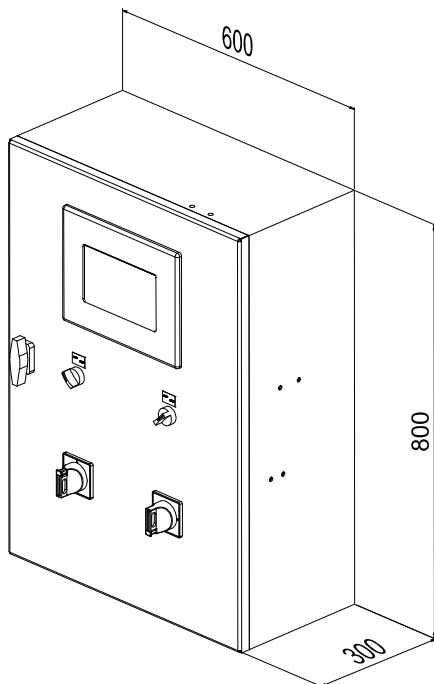


Pour 1 à 3 moteurs

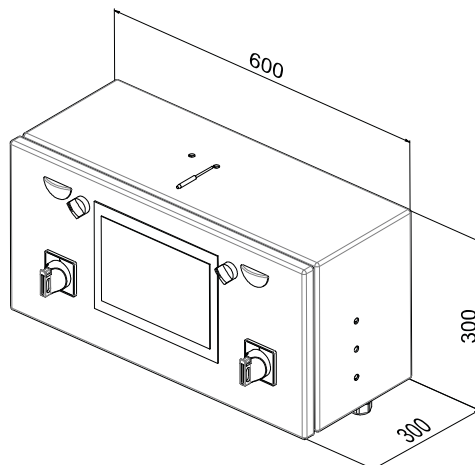

Coffret LG7

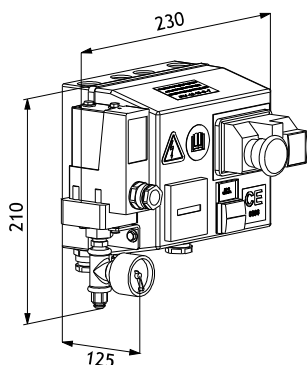

Boîtier REPORT STATUS

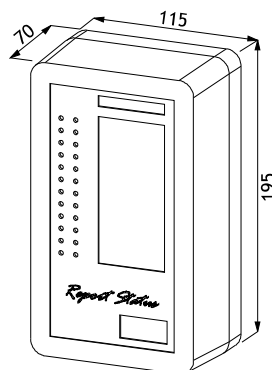

Pompes à vide EVISA.R, voir pages 28 & 59

Filtrations anti-bactériennes, voir page 60

Réservoirs de vide, voir page 66

## Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
- Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
- Autres tensions et fréquences sur demande

# HOSPIVAC® G - EVISA

Technologie lubrifiée



## Références des centrales

| HOSPIVAC® G - Régulation "tout ou rien" (TOR)                                        |                                   | E25.R                                              | E40.R  | E65.R             | E100.R | E150.R            | E200.R | E300.R            |        |                    |        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|
| HOSPIVAC® G                                                                          | 3-ph, 400V<br>50 Hz               | 911818                                             | 911819 | 914472            | 914473 | 914474            | 914475 | 916672            |        |                    |        |                    |
| HOSPIVAC® G                                                                          | 1-ph, 230V<br>50 Hz               | 916087                                             | 916088 | -                 | -      | -                 | -      | -                 |        |                    |        |                    |
| HOSPIVAC® G                                                                          | 3-ph, 380V<br>60 Hz               | 911818                                             | 911819 | 925022            | 925023 | -                 | 925024 | 925025            |        |                    |        |                    |
| HOSPIVAC® G - Régulation FLEXO vide stable                                           |                                   | E25.R                                              | E40.R  | E65.R             | E100.R | E150.R            | E200.R | E300.R            | E350.R | E400.R             | E500.R | E600.R             |
| HOSPIVAC® G                                                                          | 3-ph, 400V<br>50 Hz               | 919182                                             | 919183 | 919184            | 919185 | 919186            | 919187 | 919188            | 917639 | 918284             | 917640 | 918285             |
| HOSPIVAC® G                                                                          | 1-ph, 230V<br>50 Hz               | 919193                                             | 919194 | -                 | -      | -                 | -      | -                 | -      | -                  | -      | -                  |
| HOSPIVAC® G                                                                          | 3-ph, 380V<br>60 Hz               | 919182                                             | 919183 | 925027            | 925028 | -                 | 925029 | 925030            | -      | 925031             | -      | -                  |
|                                                                                      |                                   | E25.R                                              | E40.R  | E65.R             | E100.R | E150.R            | E200.R | E300.R            | E350.R | E400.R             | E500.R | E600.R             |
| Régulation<br>Tout ou Rien<br>ou<br>FLEXO vide<br>stable<br>400V + N + T             | C2020                             | 2 pompes                                           | 724859 |                   | 724860 |                   |        | 724867            |        |                    |        |                    |
|                                                                                      |                                   | 3 pompes                                           | 724920 |                   | 724848 |                   |        | 724839            |        |                    |        |                    |
|                                                                                      | PM2                               | 2 pompes                                           | 724861 |                   | 724862 |                   |        | 724868            |        |                    |        |                    |
|                                                                                      |                                   | 3 pompes                                           | 724826 |                   | 724849 |                   |        | 724934            |        | 724840             |        |                    |
|                                                                                      |                                   | 4 pompes                                           | 724863 |                   | 724865 |                   |        | 724841            |        | 724932             |        |                    |
|                                                                                      |                                   | 5 pompes                                           | 724864 |                   | 724866 |                   |        | 724929            | 724929 | 724933             |        |                    |
|                                                                                      |                                   | 6 pompes                                           | 724827 |                   | 724850 |                   |        | 724930            | 724931 | 724870             |        |                    |
| Régulation<br>Tout ou Rien<br>400V+ N + T                                            | MIL                               | 2 pompes                                           | 724857 |                   | 724858 |                   |        | -                 |        |                    |        |                    |
|                                                                                      |                                   | 3 pompes                                           | 724921 |                   | 724922 |                   |        | -                 |        |                    |        |                    |
| Régulation<br>FLEXO vide<br>stable<br>400V+ N + T                                    | MIL                               | 2 pompes                                           | 724924 |                   | 724923 |                   |        | -                 |        |                    |        |                    |
|                                                                                      |                                   | 3 pompes                                           | 724825 |                   | 724847 |                   |        | -                 |        |                    |        |                    |
| Régulation TOR LG7 +<br>vacuomètre + vacuostat<br>(400V + N + T)                     |                                   | 717743                                             | 717744 |                   | 717745 | 717746            | 717747 |                   | -      |                    |        |                    |
| Régulation TOR LG7 +<br>vacuomètre + vacuostat<br>(1-ph 230V)                        |                                   | 718296                                             | 718297 | -                 |        |                   |        |                   |        |                    |        |                    |
| Régulation VIDE STABLE LG7 +<br>vacuomètre + vacuostat<br>(400V+N+E)                 |                                   | 719337                                             | 719338 |                   | 719339 | 719340            | 719341 |                   | -      |                    |        |                    |
| Régulation VIDE STABLE LG7 +<br>vacuomètre + vacuostat<br>(1-ph 230V)                |                                   | 719342                                             | 719343 | -                 |        |                   |        |                   |        |                    |        |                    |
|                                                                                      |                                   | Filtration à choisir en fonction du débit installé |        |                   |        |                   |        |                   |        |                    |        |                    |
| ❶ Filtration<br>anti-<br>bactérienne<br>livrée<br>séparément<br>(fixation<br>murale) | Simple avec by-pass               | FD30B<br>811848                                    |        | FD65B<br>811849   |        | FD130B<br>811850  |        | FD320B<br>811851  |        | FD600B<br>811852   |        | FD1000B<br>814915  |
|                                                                                      | Sans by-pass +<br>vanne isolement | 2 x FD1000S<br>2 x 817753                          |        |                   |        |                   |        |                   |        |                    |        |                    |
|                                                                                      | Duplex parallèle                  | FD60DP<br>814967                                   |        | FD130DP<br>814968 |        | FD260DP<br>814969 |        | FD640DP<br>814970 |        | FD1200DP<br>814971 |        | FD2000DP<br>820146 |

Spécifications pouvant évoluer sans préavis.

# Centrales de vide MODULABLES

pour applications médicales



## Références des accessoires et options

|                                                      |           | E25.R                                              | E40.R | E65.R            | E100.R | E150.R               | E200.R | E300.R | E350.R                   | E400.R | E500.R                   | E600.R |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------|------------------|--------|----------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Sécurité niveau d'huile                              | PM2       | 625020 x X                                         |       | 625369 x X       |        | 624245 x X           |        |        | 623314 x X               |        |                          |        |
| Sécurité niveau huile +T°C                           | PM2       | 724693 x X                                         |       | 724954 x X       |        | 624247 x X           |        |        | 623979 x X               |        |                          |        |
| Sécurité niveau d'huile                              | C2020/MIL | 724694 x X                                         |       | 724955 x X       |        | 619196 x X           |        |        | 623332 x X               |        |                          |        |
| Sécurité niveau huile +T°C                           | C2020/MIL | 724695 x X                                         |       | 724956 x X       |        | 623325 x X           |        |        | 623326 x X               |        |                          |        |
| Transformateur 400V/230V                             |           | si neutre non distribué                            |       |                  |        |                      |        |        |                          |        |                          | 611099 |
| ② Boîtier report Status                              | PM2       | 12 premières alarmes                               |       | 625642           |        | 12 alarmes suivantes |        | 625643 |                          |        |                          |        |
| (avec cordons électriques)                           | C2020     |                                                    |       |                  |        |                      |        |        |                          |        |                          | 625641 |
| Alimentation de secours 24V                          | PM2       | avec batterie                                      |       |                  |        |                      |        |        |                          |        |                          | 625004 |
| Pilotage du mode FLEXO ou TOR                        |           | uniquement avec CYCLIC 2020 - horloge hebdomadaire |       |                  |        |                      |        |        |                          |        |                          | 613996 |
| Marche forcée journalière par horloge                |           | uniquement avec CYCLIC 2020 - valable si FLEXO     |       |                  |        |                      |        |        |                          |        |                          | 617608 |
| Buzzer d'alarme MILLENIUM                            |           |                                                    |       |                  |        |                      |        |        |                          |        |                          | 618295 |
| ③ Pot point bas                                      |           | PR30                                               |       | 712068           |        | PR60                 |        | 706547 |                          |        |                          |        |
| Cartouche anti-bactérienne au refoulement            |           | 711103                                             |       | 717263           |        | -                    |        |        |                          |        |                          |        |
| Montage surélevé sur bac de retention                | 1 pompe   | 617610                                             |       | 617611           |        | 617612               |        |        | 617613                   |        | 624329                   |        |
|                                                      | 2 pompes  | 619543                                             |       | 619544           |        | 619545               |        |        | -                        |        |                          |        |
|                                                      | 3 pompes  | 619546                                             |       | 617614           |        | -                    |        |        |                          |        |                          |        |
| ④ Réservoir conseillé pour fonctionnement avec FLEXO | 2 pompes  | 500 l<br>710486                                    |       | 1000 l<br>710488 |        | 2000 l<br>722341     |        |        |                          |        | 2 x 2000 l<br>2 x 722341 |        |
|                                                      | 3 pompes  | 500 l<br>710486                                    |       | 1000 l<br>710488 |        | 2000 l<br>722341     |        |        | 2 x 2000 l<br>2 x 722341 |        | 3 x 2000 l<br>3 x 722341 |        |
| Réservoir vertical régulation TOUT ou RIEN           |           | Nous consulter                                     |       |                  |        |                      |        |        |                          |        |                          |        |
| ⑤ Alarme départ réseau indépendante                  |           | 1 vacuostat et 1 vacuomètre (contact sec)          |       |                  |        |                      |        |        |                          |        |                          | 708510 |

1 Filtration anti-bactérienne



2 Boîtier REPORT STATUS



3 Pot point bas



4 Réservoir de vide vertical



5 Alarme départ réseau

