

Armoire d'urgence MAVO 3

Technologie sèche



Système de secours ultime conçu pour garantir l'alimentation en fluides médicaux de certains services hospitaliers (type blocs opératoires, réanimation,...) en cas de dysfonctionnement du réseau d'alimentation principal afin de terminer les opérations en cours.

- Version standard :
 - Vide médical par une pompe à vide à palettes sèches ARICA 41V
 - Oxygène médical par 2 bouteilles mobiles d'oxygène
 - Air médical par 2 bouteilles mobiles d'air
- Sur demande :
 - Surveillance des réseaux primaires Air et O₂
 - Secours d'un deuxième réseau d'O₂
 - Secours d'un deuxième réseau d'Air
 - Surveillance protoxyde d'azote
 - Surveillance air médical 7 bar
 - Surveillance CO₂
- L'une des plus compactes du marché pour une facilité d'intégration
- Choix d'une pompe à vide à palettes exempte d'huile pour une conception sûre et appropriée en présence d'oxygène
- Continuité d'alimentation par la présence de deux bouteilles par gaz, chacune équipée d'un détendeur
- Rétablissement de la pression initiale de façon manuelle ou automatique
- Passage sur le secours par différence de pression sans contrainte électrique (sauf réseau de vide)
- Système de surveillance des réseaux PROCOM 2 intégré à l'armoire
- Report d'alarmes dans les salles (accessoires)
- Connexion simplifiée et rapide à tout type de réseau
- Armoire livrée prête à l'emploi (bouteilles non fournies)



Caractéristiques

Alimentation électrique	Puissance totale	Poids
1-ph, 230V - 50 Hz	1200 W	195 kg

Configurations possibles

VIDE	AIR	OXYGÈNE
ARICA 41V : 1-ph 230V Débit nominal : 40 m ³ .h ⁻¹ Puissance moteur : 1.5 kW	1 x B50 (10 m ³) + 1 x B20 (4 m ³)	1 x B50 (10 m ³) + 1 x B20 (4 m ³)
ARICA 41V : 1-ph 230V Débit nominal : 40 m ³ .h ⁻¹ Puissance moteur : 1.5 kW	2 x B50 (20 m ³)	2 x B50 (20 m ³)



Gamme conforme à la directive 93/42/CEE

Distribution des gaz à usage médical

pour applications médicales



Départ réseau
O₂ ou air



Connexion vide médical




Pompe à vide
ARICA 41V



REPORT MAVO 3
(225 x 83 x 47)

Encombres(mm)

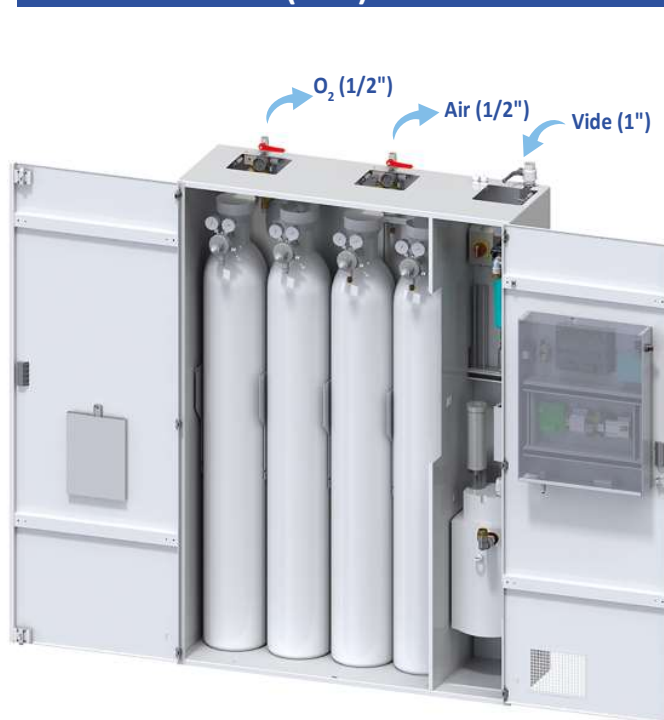

Références des centrales

MAVO 3

MAVO 3 version manuelle

MAVO 3 version automatique

ARICA 41V

924808

924809

Standard français défini par la connectique des détendeurs.

Références des accessoires et options

Capteur de surveillance	1 par gaz	- des réseaux primaires Air et O ₂ - des réseaux protoxyde d'azote, air médical 7 bar ou CO ₂	624606
Carte d'extension pour surveillance		- des réseaux primaires Air et O ₂ - des réseaux protoxyde d'azote, air médical 7 bar ou CO ₂	624607
REPORT MAVO 3 (maxi. 14*)		en saillie	624608
		encastré	624609
Alimentation électrique 24Vcc-96W		pour un nbre de REPORTS MAVO 3 compris entre 3 et 12	624610
Câble liaison Armoire / Reports		Nous consulter	
Clapet réseau O ₂ ou Air – 1/2"			623930
Clapet réseau vide		3/4"	654227
		1"	654903
Cache tuyauterie			624730

* De 13 à 14 reports, nous consulter / De 3 à 12 reports, changer l'alimentation électrique

Spécifications pouvant évoluer sans préavis.